

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	M15792
产品名称:	MH 肉汤

产品简介:

用于药敏试验。

成分 (g/L) :

牛肉浸粉	2.0
可溶性淀粉	1.5
酸水解酪蛋白	17.5
pH 值 7.4±0.2	25℃

检验原理:

牛肉浸粉和酸水解酪蛋白提供氮源、维生素和氨基酸;可溶性淀粉吸收有毒的代谢产物。

操作步骤 (供参考) :


称取本品 21g, 加热溶解于 1000ml 蒸馏水中, 121℃ 高压灭菌 15 分钟, 备用。

注: 培养基中含少量淀粉, 若灭菌前未加热溶解, 灭菌后冷却可能出现白色胶状沉淀。

注意事项:

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

MH 肉汤管中不同细菌的生长特征:

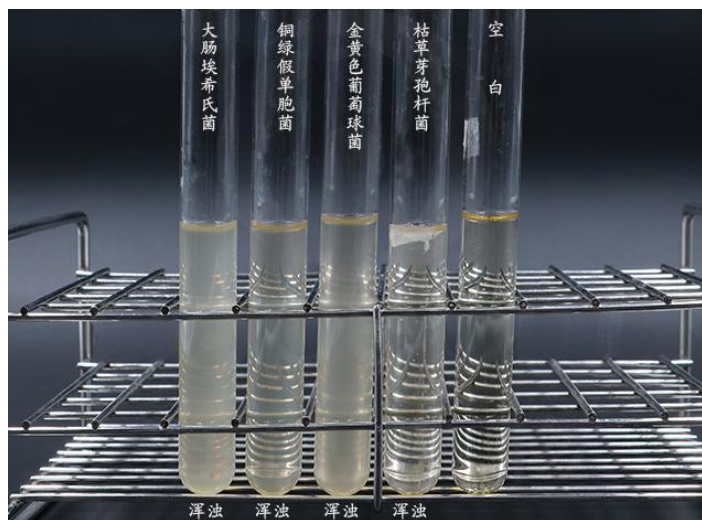

MH 肉汤微生物灵敏度试验:

按标签用法制备培养基，接种以下质控菌株，放置 36±1℃需氧培养 18-24 小时。

质控菌株	菌株编号	接种量 (CFU)	生长情况	其他特征
大肠埃希氏菌	ATCC25922	10-100	+++	浑浊
铜绿假单胞菌	ATCC27853	10-100	+++	浑浊
金黄色葡萄球菌	ATCC25923	10-100	+++	浑浊
枯草芽孢杆菌	ATCC6633	10-100	+++	浑浊

储存: 室温 避光 密封干燥

